
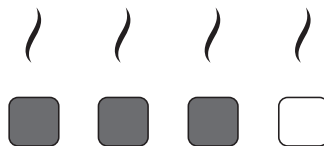
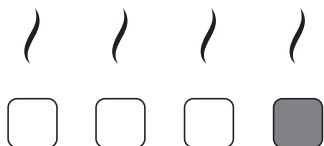
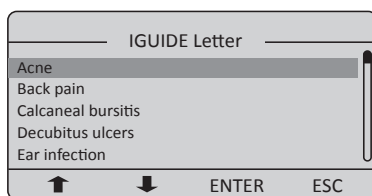


IGUIDE







**Operator's Guide
Notice d'utilisation
Bedienungsanleitung**

iGUIDE

The iMRS professional is equipped by the manufacturer with a special SD-card that stores a comprehensive database with preprogrammed settings/applications.

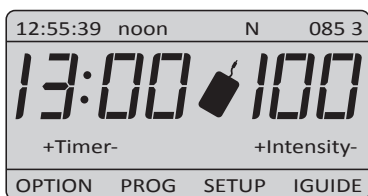




Pressing the iMRS soft key button below iGUIDE takes you to an alphabetical database where each letter of the alphabet is assigned a data base term. By selecting one letter all database entries beginning with this letter appear.

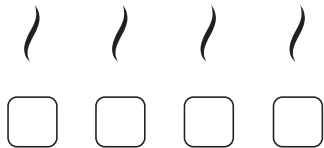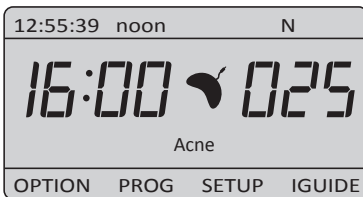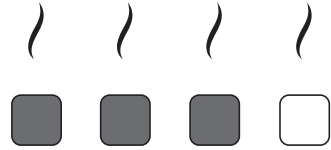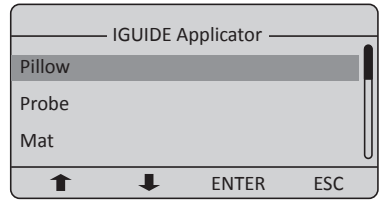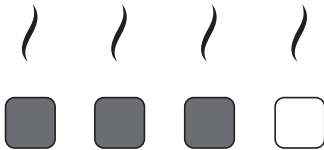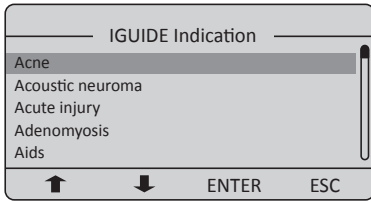






By moving the UP and DOWN arrows you can select individual terms consecutively. After confirming the desired term by pressing ENTER, please select the applicator. Again confirm by pressing ENTER and begin the application by pressing the Start/Stop-button (9). The iGUIDE contains approx. 3000 preprogrammed application programs for all 3 applicators across all 4-organ clock zones. The iGUIDE is being updated from time to time. Please consult with your Health Technician about periodic updates, which are available at a minimal surcharge.

iGUIDE

L'iMRS professional est livré en standard avec une carte SD spéciale contenant une base de données complète pour les paramètres / applications pré-réglés.

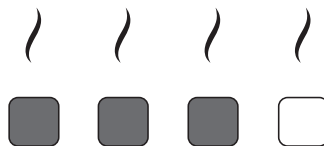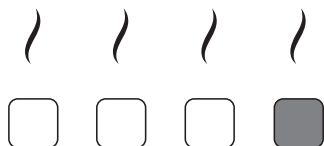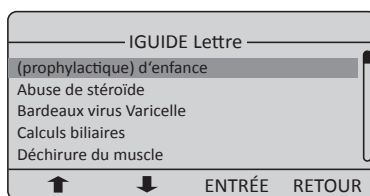




Pour accéder à la base de données alphabétique, appuyez sur le bouton IGUIDE. Dans cette base, dans un premier temps, chaque lettre de l'alphabet est associée à un terme. Lorsque vous sélectionnez une lettre, tous les termes de la base de donnée commençant par la lettre choisie apparaissent.

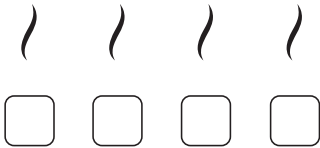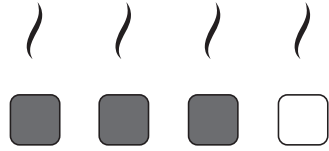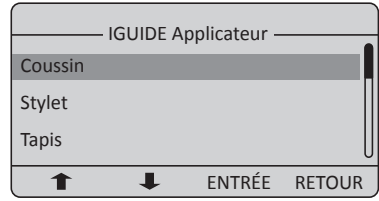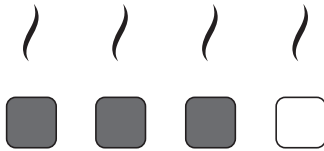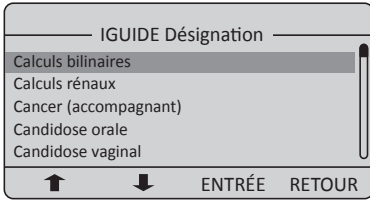







Utilisez les touches flèche vers le haut et vers le bas pour sélectionner les différents termes. Après la validation du terme souhaité avec ENTRÉE vient le choix de l'applicateur. Appuyez de nouveau sur ENTRÉE et commencez l'application au moyen de la touche Start/ Stop (9). iGUIDE dispose de plus de 3000 programmes d'application pré-réglés pour les 3 applicateurs via les 4 horloges circadiennes. iGUIDE fait de temps en temps l'objet d'une extension. Veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller en produits médicaux sur les mises à jour éventuellement disponibles et vendues à un prix dérisoire.

iGUIDE

Das iMRS professional wird werksseitig mit einer speziellen SD-Karte ausgeliefert, auf welcher eine umfangreiche Datenbank für voreingestellte Einstellungen / Anwendungen gespeichert ist.

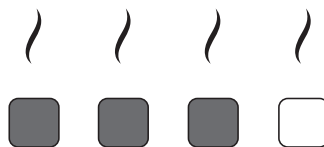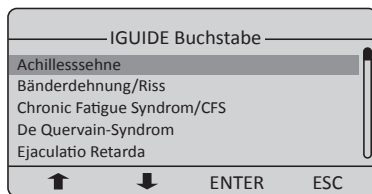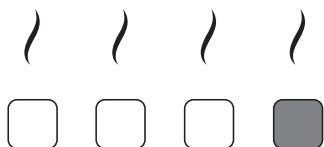

Durch Drücken des Buttons IGUIDE gelangen Sie in eine alphabetische Datenbank, wobei jedem alphabetischen Buchstaben zunächst ein Datenbankbegriff zugeordnet ist. Durch Auswahl eines Buchstabens erscheinen alle Datenbankbegriffe mit dem gewählten Anfangsbuchstaben.

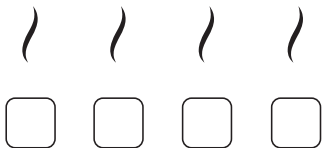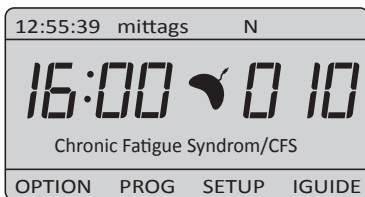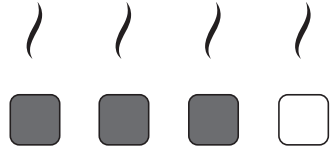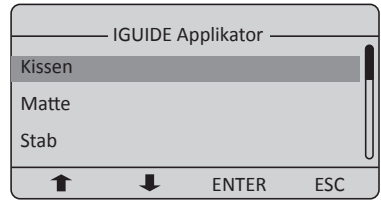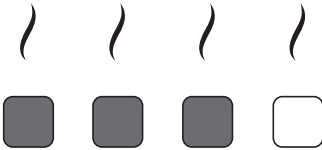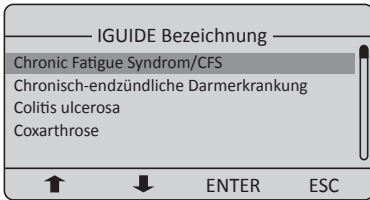

Über die Auf- bzw. Ab-Pfeiltasten können die einzelnen Begriffe nacheinander ausgewählt werden. Wurde der gewünschte Begriff mit ENTER bestätigt, folgt die Auswahl des Applikators. Bitte erneut mit ENTER bestätigen und die Anwendung mit der Start/Stop-Taste (9) starten. iGUIDE verfügt über ca. 3000 voreingestellte Anwendungsprogramme für alle 3 Applikatoren über alle 4 Organuhren. iGUIDE wird von Zeit zu Zeit erweitert. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Medizinprodukteberater über etwaig erhältliche Updates, welche gegen einen geringen Aufpreis erhältlich sind.

Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH

Bodenackerstrasse 69 | 4657 Dulliken, Schweiz

Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH

Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland

Telefon: +49 (7524) 996 950 | Telefax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions USA Inc.

1200 NE 7Th Ave Suite 7 | Fort Lauderdale, Florida 33304, USA

Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Canada Inc.

64 Skipper Lane | Oakville, ON, L6L 5Y8, Kanada

Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.

998 Canton Road | Mongkok | Kowloon | Hong Kong

Telefon: +852 2337-8774 | E-Mail: asia@swissbionic.com

www.swissbionic.com